


Date d'édition : 23.02.2025

Ref : EWTGUHM161.72

HM 161.72 Piège à sédiments (Réf. 070.16172)

En option HM 161.73

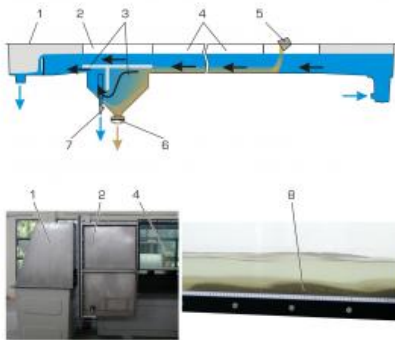

Les écoulements dans les rivières, canaux et zones côtières sont souvent accompagnés d'un transport de sédiments.

Il s'agit avant tout du transport par charriage, durant lequel des matières solides se déplacent dans le fond du cours d'eau.

Le HM 161.72 permet la réalisation de tests sur le transport par charriage et se compose d'un piège à sédiments et d'un seau pour l'alimentation en sédiments.

Le piège à sédiments évite que des sédiments ne pénètrent dans la pompe ou dans le débitmètre du canal de test HM 161.

L'écoulement près du lit, qui contient les sédiments, est conduit dans le piège où les sédiments coulent en direction du sol et s'y accumulent.

L'eau libérée des sédiments continue alors de couler dans l'élément de sortie.

Les sédiments sont retirés manuellement du piège et rapportés au niveau de l'alimentateur.

Le HM 161.72 n'est pas adapté aux essais sur le transport des sédiments en suspension.

Le piège à sédiments est monté directement au moment de l'installation du canal de test, entre la section de test et l'élément de sortie.

Il n'est pas possible de le monter plus tard.

Contenu didactique / Essais

- observation du transport par charriage au fond du canal
 - roulement et saltation
 - formation et déplacement des rides et des dunes
- Avec le HM 161.29 ou le HM 161.46
- marques d'obstacle fluviales

Les grandes lignes

- Transport par charriage dans des canaux ouverts

Les caractéristiques techniques

Piège à sédiments en acier inoxydable, capacité: env. 270L

Dimensions et poids

Lxlxh: 1000x830x1740mm (piège)

Poids: env. 620kg

Nécessaire au fonctionnement

Sédiments: sable (taille de grain 1...2mm)

réservoir collecteur, raccord d'eau, drain

Date d'édition : 23.02.2025

Liste de livraison

1 piège à sédiments, 1 jeu d'accessoires, 1 notice

Accessoires disponibles et options

HM161.73 - Alimentateur en sédiments

HM 161.29 Vanne plane

HM 161.46 Jeu de piles, sept profils

Options

Ref : EWTGUHM161.73

HM 161.73 Alimentateur en sédiments (Réf. 070.16173)

Nécessite le HM 161.72



L'alimentateur en sédiments est constitué principalement d'une goulotte d'alimentation vibrante qui dépose les sédiments dans la section essai du HM 161.

L'alimentateur est habituellement monté au-dessus de l'entrée de la section essai.

On utilise comme sédiments du sable ayant une taille de grain de 1,2mm.

L'alimentateur est monté sur une estrade accessible installée à côté du canal essai.

Ce qui est confortable pour l'utilisation.

L'estrade présente également l'avantage de éviter que les vibrations de l'alimentateur n'influencent sur la section essai.

Le HM 161.73 n'est pas adapté aux essais sur le transport des sédiments en suspension.

Le HM 161.73 est utilisé avec le piège à sédiments HM 161.72.

Les grandes lignes

- Alimentation en sédiments par le biais d'une goulotte d'alimentation vibrante

Les caractéristiques techniques

Alimentateur

débit d'alimentation: 0,5m³/h

fréquence: 3600min⁻¹

Contenance de l'entonnoir: 50L

Hauteur sous plafond recommandée: 5m

Dimensions et poids

Lxlxh: 1900x500x1050mm (alimentateur)

Poids: env. 320kg (alimentateur)

Lxlxh: 1800x1300x2000mm (estrade)

Poids: env. 200kg (estrade)

Nécessaire au fonctionnement

400V, 50Hz, 3 phases ou 230V, 60Hz, 3 phases

Sédiments: sable (taille de grain 1...2mm)

Liste de livraison

Date d'édition : 23.02.2025

1 alimentateur en sédiments, 1 estrade, 1 jeu d'accessoires, 1 notice

Accessoires disponibles et options
HM161.72 - Piège à sédiments

Ref : EWTGUHM161.29

HM 161.29 Vanne plane (Réf. 070.16129)



Les vannes planes font partie des ouvrages de contrôle mobiles; l'écoulement les traverse par dessous. Une vanne plane est une paroi verticale qui produit une retenue dans un canal traversé par un écoulement. Les vannes planes sont souvent utilisées pour garantir une profondeur d'évacuation minimum de l'eau en amont en cas de débit variable, p.ex. pour la navigation. L'ouverture de la vanne plane HM 161.29 et donc la décharge en dessous de la vanne peut être réglée manuellement à l'aide d'une roue à main.

Contenu didactique / Essais

- écoulement dénoyé (libre) sous une vanne plane
- écoulement noyé (avec retenue) sous une vanne plane
- observation de la contraction de jet (Vena Contracta)
- observation des ressauts dans l'eau en aval

Les grandes lignes

- Écoulement par dessous une vanne plane

Les caractéristiques techniques

Vanne

- plaque de déversoir en PVC
- ajustage de la hauteur: 0...400mm

Dimensions et poids

Lxlxh: 410x720x690mm

Poids: env. 10kg

Liste de livraison

- 1 vanne plane
- 1 jeu d'accessoires
- 1 notice

Date d'édition : 23.02.2025

Ref : EWTGUHM161.46

HM 161.46 Jeu de piles, sept profils (Réf. 070.16146)



Les obstacles présents dans le canal réduisent la section d'écoulement. Il peut donc se produire une retenue de l'eau devant les obstacles. Le HM 161.46 comprend plusieurs piles avec différents profils caractéristiques des piles de pont. On étudie avec une seule pile le comportement d'écoulement en cas d'étranglement de section faible. Jusqu'à trois piles installées en même temps permettent d'obtenir un étranglement de section important. Il est possible d'étudier l'influence de l'angle d'incidence en tournant la pile installée. Un dispositif de serrage permet de fixer la ou les pile(s) dans le canal d'essai. Une échelle indique l'angle entre les pointes de la pile et l'écoulement.

Contenu didactique / Essais

- écoulement sous-critique avec étranglement de section faible ou important
- écoulement supercritique avec étranglement de section faible ou important
- influence du profil de la pile
- retenue devant des piles
- changement d'écoulement au niveau de la pile
- influence de l'angle d'incidence

Les grandes lignes

- Étranglement de section latéral dans le canal

Les caractéristiques techniques

Piles en PVC

Échelle angulaire

- 0...90°
- définition: 15°

Dimensions et poids

Lxlxh: 660x220x640mm (fixation)

Poids: env. 200kg

Liste de livraison

1 jeu de piles avec différents profils, 1 fixation avec dispositif de serrage, 1 jeu d'accessoires, 1 notice