

HAMBURG

Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition: 01.11.2025



Ref: EWTGUSE110.48

SE 110.48 Essai de flexion, déformation plastique (Réf. 022.11048)

Observation et détermination entre la déformation élastique et plastique, Nécessite bâti SE 112

Les sollicitations mécaniques, auxquelles sont soumis de manière générale les éléments de construction, génèrent des contraintes dans le composant ou matériau concerné.

Lorsque ces contraintes sont trop élevées, une déformation plastique se produit en plus de la déformation réversible élastique.

Le composant ne revient pas entièrement à sa forme initiale; cest pourquoi on parle ici de modification de forme. La poutre étudiée dans le SE 110.48 est maintenue à ses deux extrémités.

Pour la fixation de la poutre, un palier fixe et un palier libre sont compris dans la liste de livraison.

La poutre est soumise à une charge ponctuelle.

Le dispositif de charge peut être positionné à nimporte quel endroit du bâti.

Un comparateur à cadran mesure la déformation.

Des poutres constituées de matériaux et profils différents sont comprises dans la liste de livraison.

Lessai permet dobserver et déterminer avec précision le passage de la zone de déformation élastique à la zone de déformation plastique.

Un diagramme force-allongement est établi à partir des valeurs obtenues; il met en évidence le comportement non linéaire.

Les pièces de lessai sont disposées de manière claire, et bien protégées dans un système de rangement. Lensemble du montage expérimental est monté dans le bâti SE 112.

Contenu didactique / Essais

- poutre soumise à une charge élastique
- enregistrement dun diagramme force-allongement et détermination du comportement non linéaire
- comparaison entre courbe de charge et courbe de décharge
- démonstration de la non-validité du principe de superposition dans la zone plastique

Les grandes lignes

- observation et détermination du passage de la déformation élastique à la déformation plastique
- enregistrement du diagramme force-allongement

Les caracteristiques techniques

Poutres

- 1x 1000x15x3mm, acier
- 1x 1000x15x3mm, aluminium
- 1x profil en H, 1000x15x15x2mm, aluminium

Dispositif de charge

- charge max.: ±5000N
- longueur max. du déplacement: 100mm





Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 01.11.2025

Measuring ranges

- déplacement: 0...50mm

Dimensions et poids

Lxlxh: 1170x480x178mm

Poids: env. 30kg

Liste de livraison

1 jeu de poutres

1 dispositif de charge

2 appuis

1 comparateur à cadran

1 dispositif de traction

1 système de rangement avec mousse de protection


1 documentation didactique

Accessoires disponibles et options

SE112 - Bâti de montage

Catégories / Arborescence

Techniques > Mécanique > Résistance des matériaux > Déformations élastiques

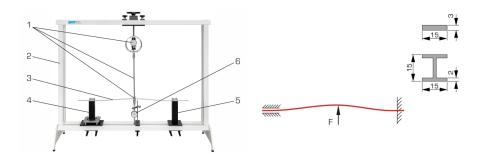


GSDE s.a.r.l www.gsde.fr





Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 01.11.2025

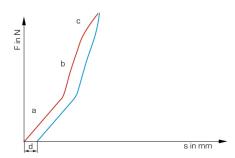



HAMBURG

Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 01.11.2025





Options

Ref: EWTGUSE112

SE 112 Bâti de montage pour la gamme SE 110.xx (Réf. 022.11200)

Montages simples, clairs pour des essais de statique, de résistance des matériaux, de dynamique



Le bâti de montage SE 112 permet deffectuer des montages expérimentaux clairs et simples en rapport avec les domaines de la statique, de la résistance des matériaux et de la dynamique.

Le SE 112 se compose de profilés en acier qui sont vissés à un bâti de montage.

Deux pieds latéraux garantissent une position stable.

Le montage du bâti à partir de différents éléments seffectue facilement et rapidement, ce qui requiert peu de manipulations.

Les grandes lignes

- bâti pour les montages expérimentaux relatifs à la statique, la résistance des matériaux et la dynamique

Les caractéristiques techniques





Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition: 01.11.2025

Bâti de montage en profilés en acier - ouverture du bâti lxh: 1250x900mm - largeur des rainures du profilé: 40mm

Dimensions et poids

Lxlxh: 1400x400x1130mm (monté) Lxlxh: 1400x400x200mm (non monté)

Poids: env. 32kg

Liste de livraison

1 bâti de montage en pièces détachées

1 jeu de vis avec clé pour vis à six pans creux

1 mode demploi

Accessoires disponibles et options WP300.09 - Chariot de laboratoire

en option

Conditions déquilibre

SE 110.50 Câble soumis au poids propre

SE 110.53 Équilibre dans un système plan isostatique

Ponts, poutres, arcs

SE 110.12 Lignes dinfluence au niveau de la poutre cantilever

SE 110.16 Arc parabolique

SE 110.17 Arc à trois articulations

SE 110.18 Forces au niveau dun pont suspendu

Forces et déformation dans un treillis

SE 110.21 Forces dans différents treillis plans

SE 110.22 Forces dans un treillis hyperstatique

SE 110.44 Déformation dun treillis

Déformations élastiques et permanentes

SE 110.14 Courbe de flexion élastique dune poutre

SE 110.20 Déformation des bâtis

SE 110.29 Torsion de barres

SE 110.47 Méthodes de détermination de la courbe de flexion élastique

SE 110.48 Essai de flexion, déformation plastique

Stabilité et flambement

SE 110.19 Étude de problèmes de stabilité simples

SE 110.57 Flambement de barres

Vibrations sur une poutre en flexion

SE 110.58 Vibrations libres sur une poutre en flexion